



FICHA INFORMATIVA DE PRODUCTO

MODELO DE RAÍL R-450S

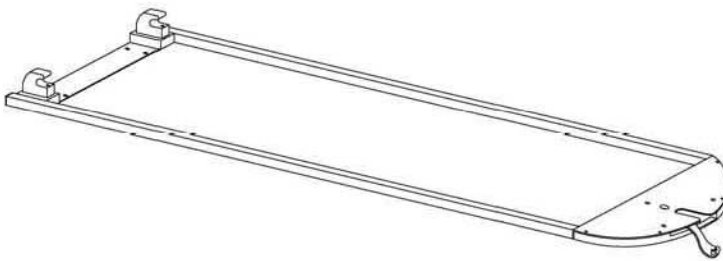

Peso del raíl: 6,500 kg.

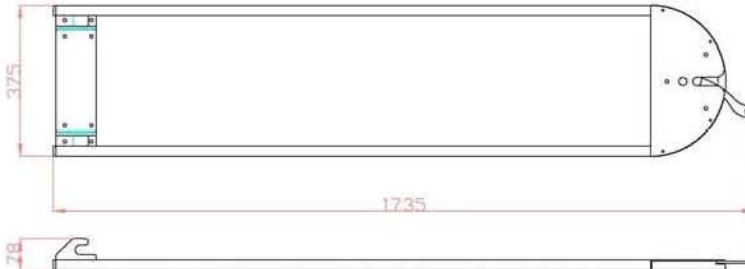

Dimensiones raíl: Cotas en mm.

Calidad de materiales

Raíl realizado en acero y acabado superficial en pintura epoxy.

Sistema de bloqueo y de inmovilización de la camilla a la ambulancia

El raíl R-450S es compatible con los modelos de Kartsana de la Serie 230, Serie 790, Serie 400F y Serie 860F. El raíl cuenta con 2 topes para el eje de las ruedas de ataque en su parte delantera y un punto de anclaje (tercer punto) en la parte posterior de bloqueo / desbloqueo manual mediante palanca. El sistema de tercer punto de anclaje evita vuelcos y proyecciones de la camilla en caso de accidente.