


FICHA INFORMATIVA DE PRODUCTO


SERIE R-600

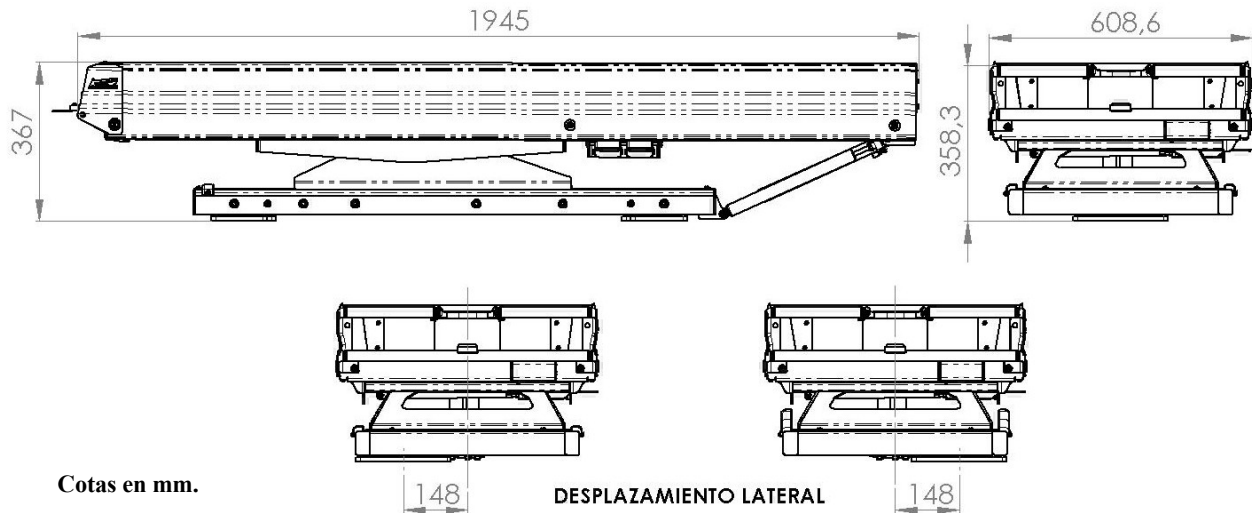

Cotas en mm.

Peso: **90kg.**

Carga máxima: **220kg.**

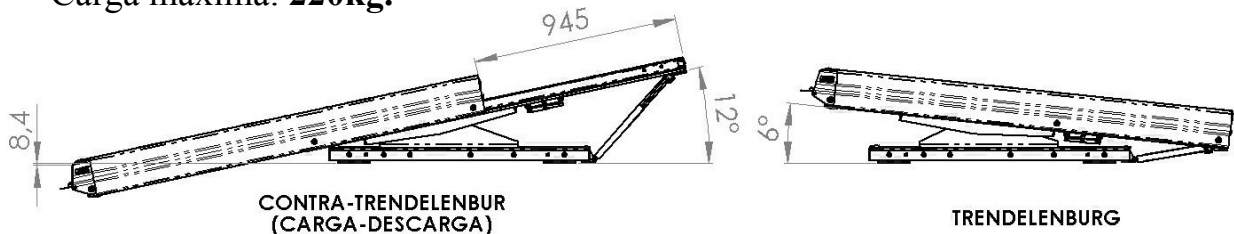

Calidad de materiales

Material predominante aluminio y acabado superficial en pintura epoxy.

Características principales

Portacamillas compatible con los modelos de Kartsana de la Serie Fuego, Serie 230, Serie 790, Serie 400F, Serie 860F, Serie 400B y Serie 860B dependiendo del anclaje con que se haga el pedido, ya sea básico (sin anclajes), anclaje R-402, R-450S o R-450B. La serie R-600 se caracteriza por tener desplazamiento lateral y posiciones Contra-trendelenburg y Trendelenburg además de deslizarse hacia fuera para facilitar las maniobras de carga y descarga. Preparado para alojar camilla cuchara o espinal.