



FICHE TECHNIQUE TGX-241

SÉRIE 241 COMPACTE

MÉCANIQUES



Aluminium



Inclinable



250 Kg



Barrières rabattables
latéralement et
longitudinalement



Repose-pieds avec
amortisseur



Pliable


CERTIFIED
10G



- ▷ Capacité de charge de 250 kg
- ▷ Tête réglable assistée par choc
- ▷ Trendelenburg, anti-Trendelenburg et position intermédiaire
- ▷ 4 roues Ø200 (2 fixes + 2 pivotantes avec frein)
- ▷ 3 hauteurs disponibles pour s'adapter à la rampe du rail ambulance (M, L et XL)
- ▷ Rails pliables latéraux et longitudinaux
- ▷ Potence porte-sérum pliable
- ▷ Kit ceinture épaule, abdomen et jambe (3 points)
- ▷ Plateau en aluminium pour massage cardiaque
- ▷ 4 poignées télescopiques
- ▷ Dépliage automatique des jambes
- ▷ Actionnement anti-accidental des gâchettes de jambe (TGX-241M uniquement)
- ▷ Tête pliable avec poignées pliables pour manœuvrer dans des endroits difficiles d'accès
- ▷ Jambe à une articulation assistée par choc
- ▷ Matelas soudé ignifuge

DIMENSIONS ET POIDS

| | S | M | L | XL |
|---|---|------|------|------|
| H Hauteur (mm) | - | 860 | 909 | 953 |
| HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm) | - | 590 | 642 | 686 |
| W Largeur (mm) | - | 590 | 590 | 590 |
| L Longueur (mm) | - | 1953 | 1953 | 1953 |
| L2 Longueur pliée (mm) | - | 1630 | 1630 | 1571 |
| Poids (kg) | - | 49,5 | 51,5 | 53 |

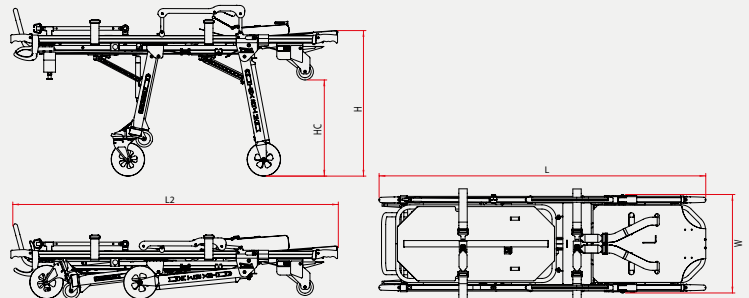

PRODUITS CONNEXES



R-419



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com