



FICHA TÉCNICA

TG-2022 SUPERBRAVA

SERIE SUPERBRAVA

EQUIPOS ELÉCTRICOS



Aluminio



Eléctrica

320 Kg
sin asistenciaResistente
al agua


R10

CERTIFIED
20G

- ▷ Control de la camilla desde la posición del técnico.
- ▷ Capacidad de carga de hasta 320 kg sin asistencia.
- ▷ Certificación UTAC 20G.
- ▷ Compatibilidad electromagnética según norma R10.
- ▷ Desbloqueo manual del motor mediante sistema de embrague.
- ▷ Batería individual con capacidad extra de 50 ciclos, testado con 100 kg de peso.
- ▷ Panel de control secundario que permite el despliegue automático de las patas.
- ▷ Barandillas regulables con 6 posiciones que soportan 100 kg en su posición horizontal y con capacidad para alojar pacientes bariátricos.
- ▷ Kit bariátrico opcional con soporte para los hombros que proporciona un mayor confort al paciente.
- ▷ Amplio cabezal articulado electrónicamente.
- ▷ Perfil retráctil del cabezal para maniobrar en espacios reducidos.
- ▷ Camilla de gran amplitud (590 mm) para asegurar la estabilidad.
- ▷ Luces de emergencia para mayor seguridad.
- ▷ Asa para facilitar la movilidad de la camilla.
- ▷ Disponibilidad de modelo específico para incubadoras.
- ▷ Diseño impermeable y fácil de limpiar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


		TG-2022
H	Altura máx. (mm)	1220
HC	Altura máx. ajustable (mm)	1090
H2	Altura mín. (mm)	490
L	Longitud (mm)	2095
L2	Longitud cerrada (mm)	1733
L3	Longitud abierta (mm)	2223
W	Ancho (mm)	590
	Capacidad de carga (kg)	320
	Peso (kg)	78

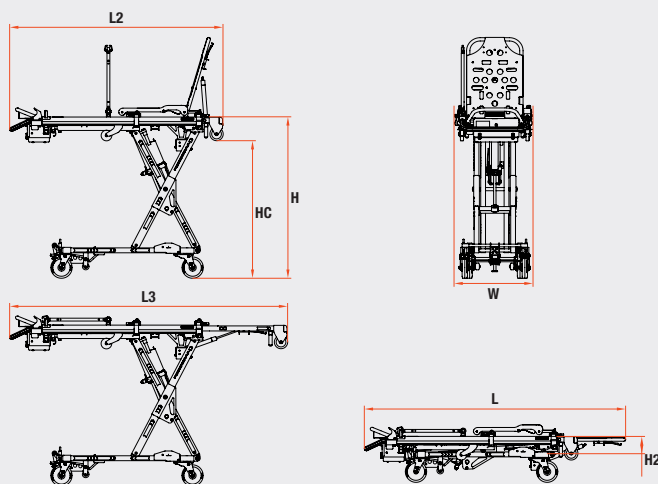

ACCESORIOS

BANDEJA PARA
INSTRUMENTOSFIJACIÓN PARA
CORPULS

PUÑOS EXTRAÍBLES

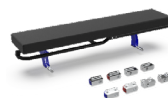CARGADOR DE
BATERÍA

KIT BARIÁTRICO

COLCHÓN PEDIÁTRICO
ADAPTADO

KARTSANA

Life-moving innovation

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com